

## Diamantpolierer - Multi-Flex KOMPO

### Komposite | Hybridkomposite mit hohem Glas- Keramikanteil

Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompo- mere und Inomere.

Die neuartige Form mit flexiblen Polierlamellen bietet dem Zahnarzt verschiedene Anwendungs- vorteile für eine noch einfachere Politur aller Kompositorestorationen, insbesondere hochgefüllter Hybrid-Komposite.

Hauptmerkmal des neuen Poliersystems ist die Flexibilität. Die Polierlamellen passen sich jeder Oberflächenstruktur an, wodurch eine gleichmäßige Politur aller Oberflächen gewährleistet wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der Erhaltung der ursprünglichen Oberflächenstruktur der Restauration. Nach der Modellation der Kompositeoberfläche mit Metallinstrumenten wird diese bei der Politur nicht mehr verändert. Außerdem sorgt die spezielle Form für eine Reduzierung der Reibungs- wärme.

Sterilisierbar bei 134° | Anwendung ohne Polierpaste

Multi-Flex Abtrag / Glätten P 170D		
Artikel Nr.:	P 170D	P 170D
Durchmesser:	110	140
Stärke/Länge(mm):	1,6	1,6
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	W	W

Multi-Flex Hochglanz P 172D		
Artikel Nr.:	P 172D	P 172D
Durchmesser:	110	140
Stärke/Länge(mm):	1,6	1,6
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	W	W

#### NEUE Form

Die Formen P 158 und P 159 wurden speziell für die Okklusal- und Flächenpolitur ent- wickelt. Durch die gedrehte Bürstenform können auch tiefe Fissuren erreicht werden.

Multi-Flex Abtrag / Glätten P 158D	 <b>NEU</b>
Artikel Nr.:	P 158D
Durchmesser:	055
Stärke/Länge(mm):	5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'
Schaft:	W

Multi-Flex Hochglanz P 159D	 <b>NEU</b>
Artikel Nr.:	P 159D
Durchmesser:	055
Stärke/Länge(mm):	5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'
Schaft:	W



SET Artikel Nr.:  
Compo Polierbox PLUS

**TIPP**

## Diamantpolierer

### Komposite | Hybridkomposite mit hohem Glas- Keramikanteil

Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompo-  
mere und Inomere.

Speziell für harte, hochgefüllte Hybridkomposite (mit hohem Glas- bzw. Keramikanteil).

Abtrag / Glätten P 160 - P 163						
Artikel Nr.:	P 160D	P 160D	P 160D	P 161D	P 163D	P 162D
Durchmesser:	030	030	050	060	050	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	10	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Hochglanz P 164 - 168						
Artikel Nr.:	P 164D	P 164D	P 164D	P 165D	P 167D	P 168D
Durchmesser:	030	030	050	060	050	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	10	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

## Diamantpolierer Komposite

3-Stufiges, leistungsstarkes, mit Diamantkörnung durchsetztes Poliersystem für brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle. Korrekturen erledigen Sie vor allem auf klassischen Kompositmaterialien mit minimalem Aufwand.

Abtrag P 131 - P 133				
Artikel Nr.:	P 131D	P 131D	P 132D	P 133D
Durchmesser:	030	040	060	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
Schaft:	FG	W	W	W

Glätten P 125 - P 127				
Artikel Nr.:	P 125D	P 125D	P 126D	P 127D
Durchmesser:	030	040	060	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
Schaft:	FG	W	W	W

Hochglanz P 128 - P 130				
Artikel Nr.:	P 128D	P 128D	P 129D	P 130D
Durchmesser:	030	040	060	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
Schaft:	FG	W	W	W

## Diamantpolierer Keramik | Metall

3-Stufiges, leistungsstarkes, mit Diamantkörnung durchsetztes Poliersystem für brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle. Korrekturen erledigen Sie vor allem auf KERAMIK und METALLEN mit minimalem Aufwand.

Abtrag P 115 - P 117 Multi-Flex P 110						
	Artikel Nr.:	P 115D	P 115D	P 115D	P 116D	P 117D
Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Glätten P 118 - P 120 Multi-Flex P 111						
	Artikel Nr.:	P 118D	P 118D	P 118D	P 119D	P 120D
Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Hochglanz P 121 - P 123 Multi-Flex P 112						
	Artikel Nr.:	P 121D	P 121D	P 121D	P 122D	P 123D
Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

 Ø 1,60 mm | FG-normal | 19 mm lang | ISO 314  
 Ø 2,35 mm | W-normal | 22 mm lang | ISO 204

## Diamantpolierer Silikat- und Glaskeramiken

Die Entwicklungen im Bereich der dentalen Restorationskeramiken bringen auch notwendige Veränderungen auf der Instrumentenseite mit sich. Speziell moderne Silikat- und Glaskeramiken wie IPS e.max, Empress o.ä. stellen durch ihren erhöhten Härtegrad eine große Herausforderung für bestehende Poliersysteme dar.

Diese Lücke schließt Rotodent mit einem neuen Diamantpoliersystem. Speziell auf die Anforderungen moderner Keramiken abgestimmt sind für eine Hochglanzpolitur nur noch zwei Polierstufen nötig. Neben der Zeitersparnis ist die Instrumentenstandzeit gegenüber bestehenden Poliersystemen deutlich erhöht. Durch die Möglichkeit der interoralen Anwendung (Schaft 204 – Winkelstück) eignet sich das Poliersystem auch für Korrekturen an bereits eingesetzten Arbeiten.




Abtrag / Glätten P 190 - P 192				
Artikel Nr.:	P 190D	P 190D	P 191D	P 192D
Durchmesser:	030	040	060	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	W	W	W	W

Hochglanz P 195 - 197				
Artikel Nr.:	P 195D	P 195D	P 196D	P 197D
Durchmesser:	030	040	060	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	W	W	W	W

## Rotodent Schleif- und Poliererset GK-1 für Silikat- und Glaskeramiken sowie Zirkon

Für größere Korrekturen an bereits eingesetzten Arbeiten empfiehlt Rotodent das 3-Stufen Poliererset GK-1.

Ein abrasiver, diamantierter Stein und zwei Diamantpolierer im praktischen Set für Chairside Bearbeitung von Silikat- und Glaskeramiken oder Zirkon.

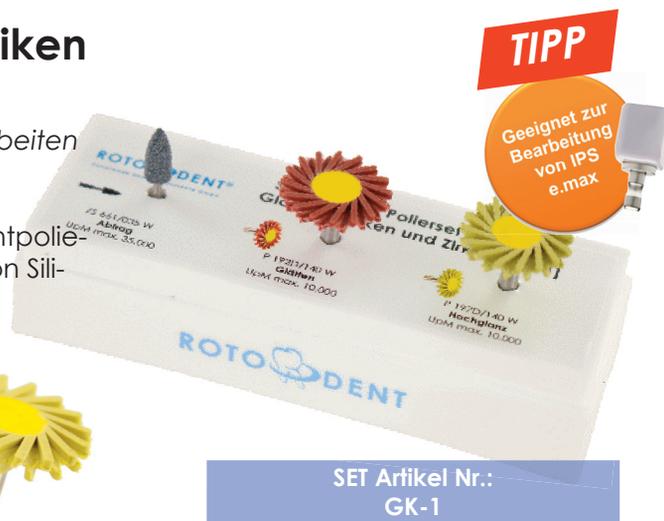

GK-1			
Artikel Nr.:	ZS 661 (Abtrag)	P 192D (Glätten)	P 197D (Hochglanz)
Durchmesser:	035	140	140
Länge (mm):	7,5	1,6	1,6
UpM Opt. (x1.000) :	15' - 25'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	204 W	204 W	204 W

## Einstufiges Diamant-Poliersystem für perfekte Komposit-Oberflächen

Die komplette Politur in einem Schritt – schnell, präzise, brillant

**Vorpolieren: Verstärkter Anpressdruck**  
**Hochglanzpolieren: Reduzierter Anpressdruck**

Vorpolitur & Hochglanz P 140 - P142			
Artikel Nr.:	P 140D	P 141D	P 142
Durchmesser:	030	040	060
Länge (mm):	7,5	10	7,5
UpM max. (x1.000)	20'	20'	20'
Schaft:	204 W	204 W	204 W

