

Flex-Polierscheiben mit Aluminiumoxid-Schleifkorn

Extra dünn und flexibel, für schwer zugängliche Bereiche. Bei diesem Poliersystem handelt es sich um flexible Polierscheiben zum Abtragen, Glätten und Polieren. Die Scheiben sind beschichtet mit Aluminiumoxid und für alle marktüblichen Komposite geeignet. Bei den Polierscheiben handelt es sich um ein vierstufiges Poliersystem.

Der Messingring in der Mitte sorgt für eine sichere Fixierung. Durch die einseitige Belegung kann sowohl ziehend als auch schiebend gearbeitet werden, ohne in Zahnzwischenräumen den benachbarten Zahn zu beschädigen. Die besondere Stärke liegt hier bei der inzisalen-, zervikalen und approximalen Anwendung mit vorbereiteter Füllungsbearbeitung.

Das dazugehörige Mandrell ist aus rostfreiem Stahl und kann im Autoclav bei 135° sterilisiert werden.

Wasserkühlung empfohlen. Einmalprodukt.


FS 20G
Körnung: grob



100 Stück

Artikel Nr.:	FS 20G	FS 20G
Durchmesser:	100	140
Stärke (mm):	0,21	0,21
UpM opt. (x 1.000):	7' - 10'	7' - 10'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

FS 21M
Körnung: mittel

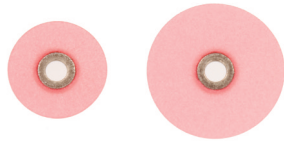

100 Stück

Artikel Nr.:	FS 21M	FS 21M
Durchmesser:	100	140
Stärke (mm):	0,17	0,17
UpM opt. (x 1.000):	7' - 10'	7' - 10'
Schaft:	unmontiert	unmontiert


FS 22F
Körnung: fein



100 Stück

Artikel Nr.:	FS 22F	FS 22F
Durchmesser:	100	140
Stärke (mm):	0,14	0,14
UpM opt. (x 1.000):	7' - 10'	7' - 10'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

FS 23UF
Körnung: ultra fein




100 Stück

Artikel Nr.:	FS 23UF	FS 23UF
Durchmesser:	100	140
Stärke (mm):	0,11	0,11
UpM opt. (x 1.000):	7' - 10'	7' - 10'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

passendes Mandrell



Artikel Nr.:	ST 280
Schaft	W

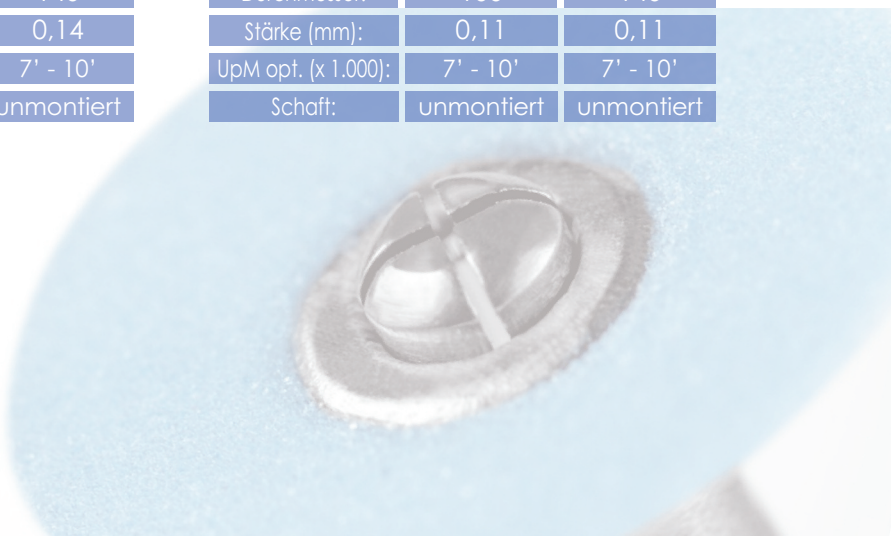

Flex-Polierscheiben

Flex-Polier-Scheiben entfernen je Körnungsstufe mehr Restaurationsmaterial als herkömmliche Scheiben, erzeugen dabei aber eine geringere Oberflächenrauigkeit, was zu einem besseren Glanz führt. Die Zahn- und Füllungs- Oberflächen werden somit substanzschonend poliert. Für besonders natürlichen Glanz auf Keramikrestorationen. Beidseitig belegt. Das dazugehörige Mandrell ist aus rostfreiem Stahl und kann im Autoclav bei 135° sterilisiert werden.

Wasserkühlung empfohlen. Einmalprodukt.

FS 12F
Körnung: fein



100 Stück

Artikel Nr.:	FS 12F	FS 12F
Durchmesser:	080	120
Stärke (mm):	0,18	0,18
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

FS 12M
Körnung: mittel



100 Stück

Artikel Nr.:	FS 12M	FS 12M
Durchmesser:	080	120
Stärke (mm):	0,2	0,2
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

FS 12G
Körnung: grob



100 Stück

Artikel Nr.:	FS 12G	FS 12G
Durchmesser:	080	120
Stärke (mm):	0,24	0,24
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	unmontiert	unmontiert

passendes Mandrell



Artikel Nr.:	ST 300
Schaft	W

Rotodent Flex-Polierer sind auch in weiß lieferbar (ultrafein | Hochglanz Politur)
FS 12UF/080 oM | FS 12UF/120 oM