


Rotodent Schleif- und Poliererset GK-1 für Silikat- und Glaskeramiken sowie Zirkon

Für größere Korrekturen an bereits eingesetzten Arbeiten empfiehlt Rotodent das 3-Stufen Poliererset GK-1.

Ein abrasiver diamantierter Stein und zwei Diamantpolierer im praktischen Set für Chairside Bearbeitung von Silikat- und Glaskeramiken oder Zirkon.
(Auch für CEREC gefräste Keramiken/Zirkon).

TIPP

Geegnet zur
Bearbeitung
von IPS
e.max

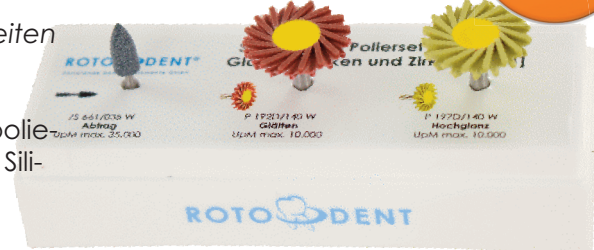


SET Artikel Nr.:
GK-1

GK-1			
Artikel Nr.:	ZS 661 (Abtrag)	P 192D (Glätten)	P 197D (Hochglanz)
Durchmesser:	035	140	140
Länge (mm):	7,5	1,6	1,6
UpM Opt. (x1.000) :	15' - 25'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	W	W	W

Rotodent Schleif- und Poliererset ZK-1 für Zirkon und Keramik

Zur Nachbearbeitung von okklusalen Kontaktpunkten bei Keramik- und Zirkonfüllungen bzw. Inlays.

Ein abrasiver diamantierter Stein und zwei Diamantpolierer im praktischen Set für Chairside Bearbeitung von Zirkon und Keramik.
(Auch für CEREC gefräste Keramiken/Zirkon).

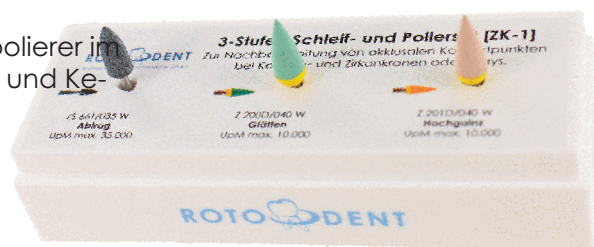

SET Artikel Nr.:
ZK-1

ZK-1			
Artikel Nr.:	ZS 661 (Abtrag)	Z 200D (Glätten)	Z 201D (Hochglanz)
Durchmesser:	035	040	040
Länge (mm):	7,5	10	10
UpM Opt. (x1.000) :	15' - 25'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	W	W	W

Kompo Poliererset für moderne Komposite

Glätten / Hochglanzpolitur von besonders harten Hybridkompositen oder Lithiumdisilikaten mit hohem Glas /-Keramikanteil.

2 Polierstufen. Je 1 Flex-Polierer in Durchmesser 110 und 1 Flex- Polierer in Durchmesser 140

Die neuartige Form mit flexiblen Polierlamellen bietet dem Zahnarzt verschiedene Anwendungsvorteile für eine noch einfachere Politur aller Kompositorestaurationen, insbesondere hochgefüllter Hybrid-Komposite.

Hauptmerkmal des neuen Poliersystems ist die Flexibilität. Die Polierlamellen passen sich jeder Oberflächenstruktur an, wodurch eine gleichmäßige Politur aller Oberflächen gewährleistet wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der Erhaltung der ursprünglichen Oberflächenstruktur der Restauration. Nach der Modellation der Kompositeoberfläche mit Metallinstrumenten wird diese bei der Politur nicht mehr verändert. Außerdem sorgt die spezielle Form für eine Reduzierung der Reibungswärme.

Sterilisierbar bei 134° | Anwendung ohne Polierpaste

Kompo Poliererset						
Artikel Nr.:	P 170D (Glätten)	P 170D (Glätten)	P 158D	P 172D (Hochglanz)	P 172D (Hochglanz)	P 159D
Durchmesser:	110	170	055	110	140	055
Stärke (mm):	1,6	1,6	5	1,6	1,6	5
UpM Opt. (x1.000) :	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	W	W	W	W	W	W



Die Formen P 158 und P 159 wurden speziell für die Okklusal- oder Flächenpolitur entwickelt. Durch die gedrehte Bürstenform können auch tiefe Fissuren erreicht werden.

